


手術


外来

●吸引管アダプター

[ 20元切込 ]

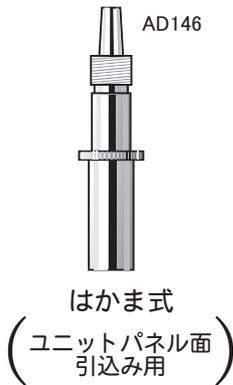


[ 10元 ]

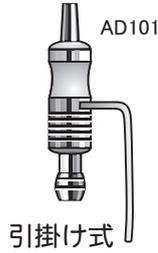


[ 中継チューブ ]

※ 吸引器の太いチューブと中継し  
微細な耳鼻科手術を補助します。

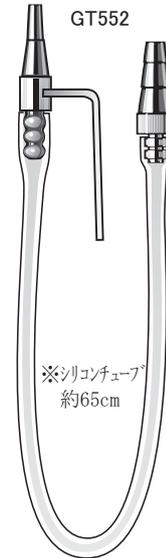


羽付型  
※ 主にローゼン  
吸引管 (10元)

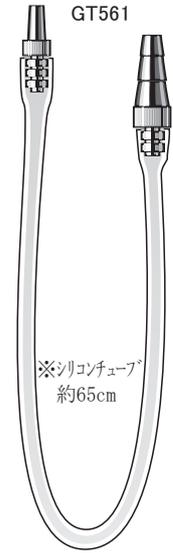

ストレート型  
※ 鼻中隔吸引剥離子  
耳用微細吸引管  
等に使う (10元)

●変換アダプター ※ 主として吸引管アダプターに用いローゼン吸引管や注射針等を取付ける。

[ 10元吸引管へ ]

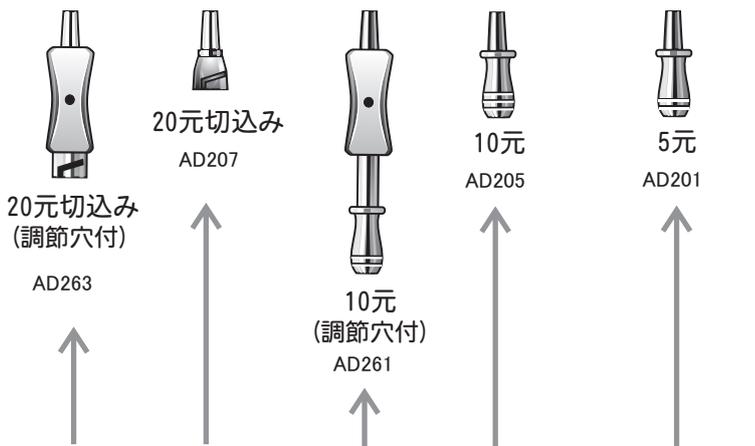


・20元切込吸引アダプター  
を接続出来ます

・10元吸引アダプター  
・吸引チューブを  
直接続出来ます

・注射器シリンジ  
・吸引チューブを  
直接続出来ます

[ 5元吸引管・注射針へ ]

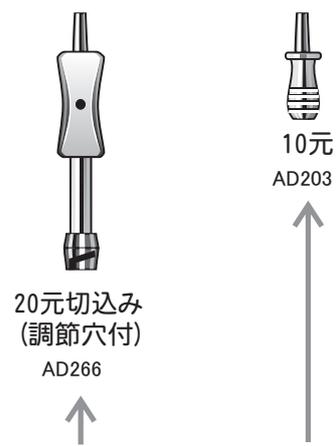

・20元切込吸引アダプター  
を接続出来ます

・10元吸引アダプター  
・吸引チューブを  
直接続出来ます

【推奨消毒滅菌方法】 中性洗剤で水洗浄後次のいずれかの滅菌を施して下さい。

- オートクレーブ (135度10分間推奨)
- E O G ガス滅菌
- プラズマ滅菌 ←シリコン管使用の器具はシリコン対応の滅菌機種に限る

手術

外来

※ お手持ちの卓上型吸引器の機能を拡張するためにチューブの先端に吸引管アダプターを取付けると吸引管各種を使用出来るようになります。

