


外来

●モータースプレーS型

※ MT611Bコンプレッサーには付属しません。

別売品です

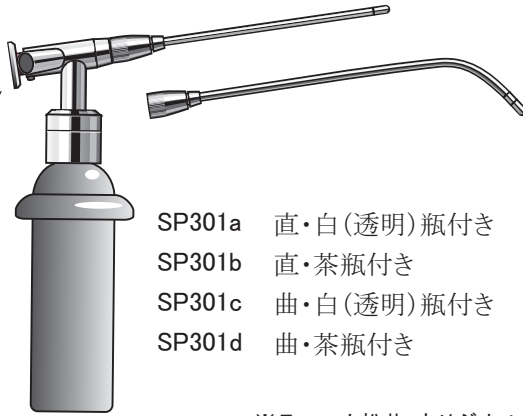


- SP301a 直・白(透明)瓶付き
- SP301b 直・茶瓶付き
- SP301c 曲・白(透明)瓶付き
- SP301d 曲・茶瓶付き

※テーエム松井 オリジナル品

【スプレーするのに必要な製品】

1. MT611Bコンプレッサー (専用送気ホース付属)
2. モータースプレーS型

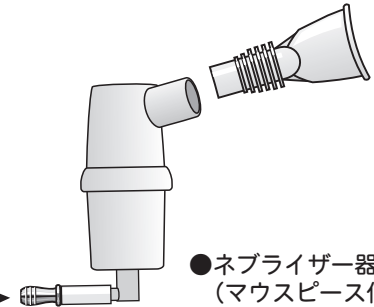


●ネブライザー器具 (マウスピース付)


※ MT611Bコンプレッサーに付属



←写真はMT611BコンプレッサーとモータースプレーSP301aの組合せ

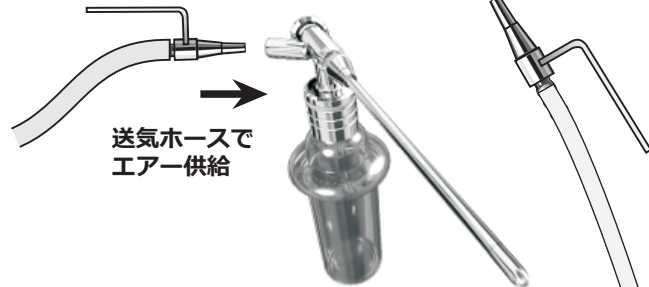

送気ホースで  
エア供給

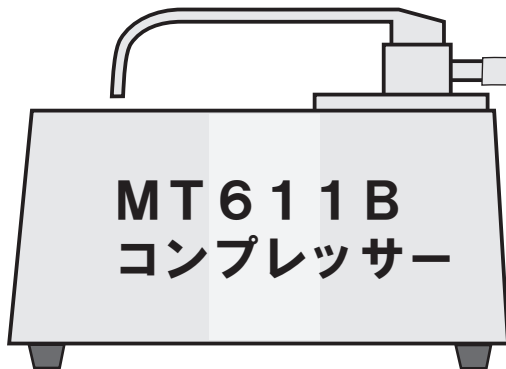

**MT611B  
コンプレッサー**

※ ツマミのネジを回して空気を漏出させて送気圧を連続的に調整できます。

●モータースプレー専用送気ホース (ミニポン用) 全長約150cm

※ MT611Bコンプレッサーに付属

※テーエム松井 オリジナル品

←※ ヘパフィルター (0.3 μm)


モータースプレーに応用できるコンプレッサーとして  
 オリジン製「ミニポン」を提供いたします。

(※モータースプレー専用送気ホース付属)

外来

★表示価格は消費税別です。

●モータースプレーS型 定価：¥12,800円

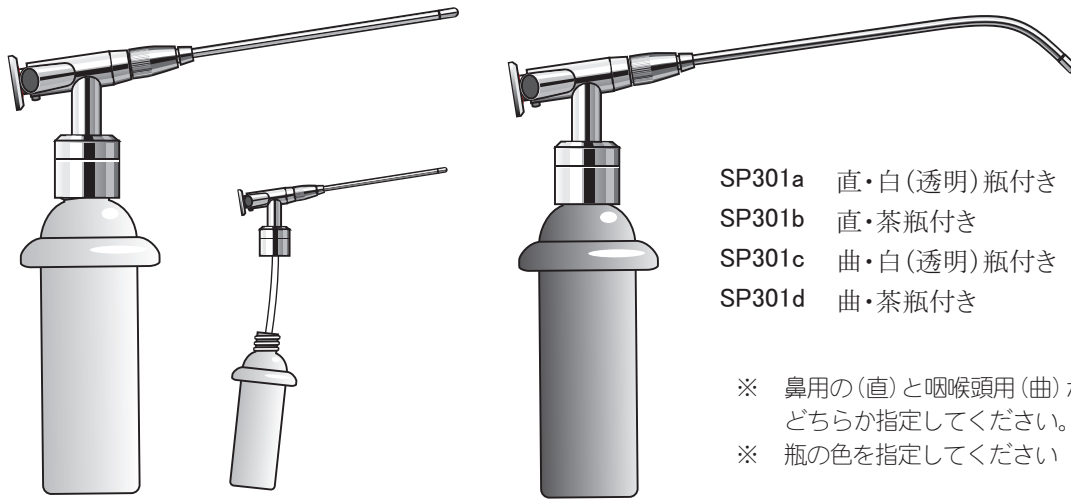


- SP301a 直・白(透明)瓶付き
- SP301b 直・茶瓶付き
- SP301c 曲・白(透明)瓶付き
- SP301d 曲・茶瓶付き

※ 鼻用の(直)と咽喉頭用(曲)があります。  
 どちらか指定してください。  
 ※ 瓶の色を指定してください(透明・茶)。


●モータースプレー胴 (ホ`外部分)

定価：¥8,600円

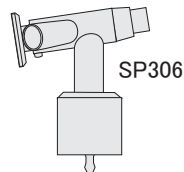


●モータースプレー瓶  
 (口金無し)

定価：¥820円

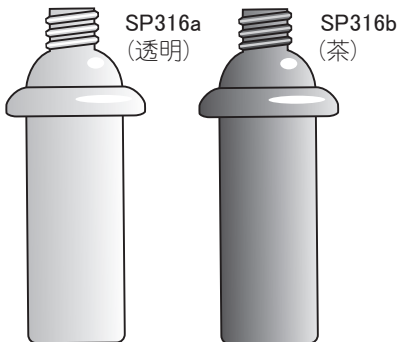

●モータースプレーノズル

定価：¥4,500円

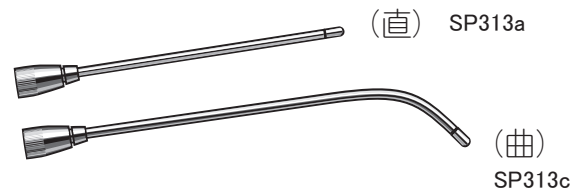

※ 簡単にノズルだけ付替えが出来ますので、  
 患者ごとに交換する際便利です。


SP317

●モータースプレー用  
 吸上げチューブ (5本入)

定価：¥600円

■スプレー瓶互換性


少量の薬液を使用したい場合は、ユニットスプレー瓶「SP213」の互換利用が可能です。その場合、吸上げチューブを「SP221」と交換し、スプレー瓶のスタンドとして綿棒立て「RS1161」をご採用下さい。

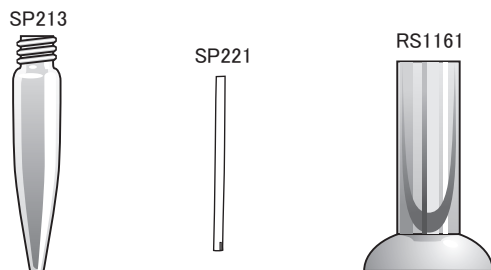

SP213a (透明)  
 SP213b (茶)  
 SP213c (緑) 各¥400円。

5本入 ¥500円。

¥1,600円。

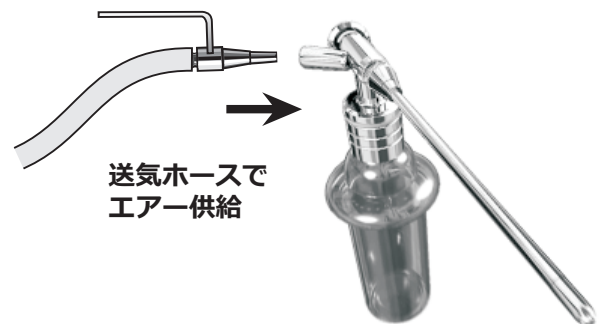


送気ホースで  
 エア供給


- モバイルユニット、モータースプレー用のスプレーです。鼻腔や咽喉頭、喉頭にスプレーする時使います。内視鏡検診の時のスプレー用途にも便利です。
- 薬液等をスプレーするためにはモバイルユニットあるいはモータースプレー用コンプレッサー、もしくは何らかの送気装置との送気ホースによる接続が必要となります。

外来

●モーターズプレーS型

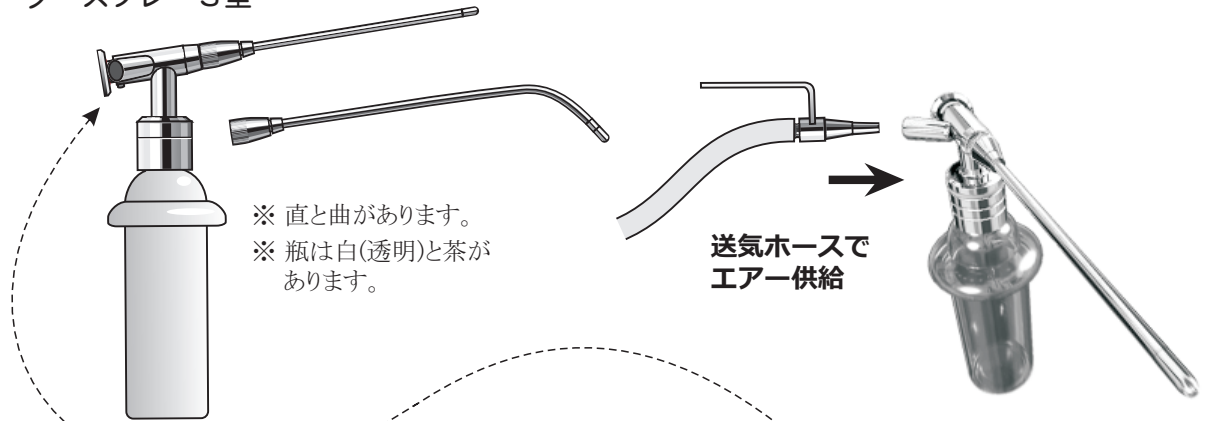

お手持ちの耳鼻科ユニット

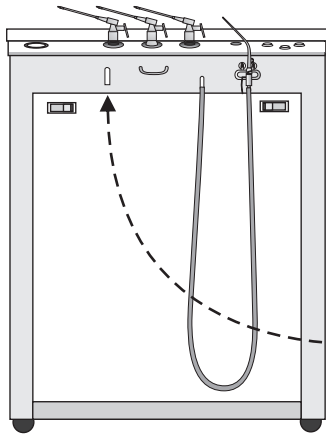

耳鼻科診療  
 ユニットの  
 耳管通気用  
 エア口につなぐ


●モーターズプレー用  
 送気ホース (汎用仕様)

GT702

接続アダプター10元(軽量)

ホース部約1.3m

お手持ちの汎用コンプレッサー

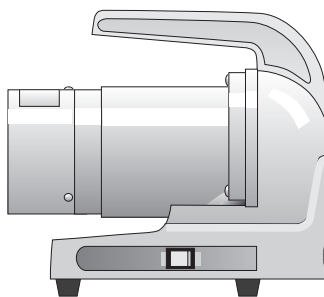

必要に応じて  
 コンプレッ  
 サー付属の送  
 気ホースを切  
 断してつなぐ

ネラトンつなぎ  
 P-923  
 (変換中継用)

調圧ツマミ

HEPAフィルター  
 (0.3 μm)

ゴム管切りっ放し  
 (外径9mm×内径5mm)

直結可能であれば  
 ゴム管を直結する

- 汎用コンプレッサー (あるいは耳鼻科診療ユニット) の送気吹出口につなぐ。
- コンプレッサーは家庭用ネブライザー程度の送気力を推奨。
- コンプレッサー等の吹出口に直接ゴム管が付けられない時はコンプレッサー等付属の送気ホースの中間を切り、モーターズプレー用送気ホースをネラトンつなぎで変換し中継接続する。